

Guia Rápido de Procedimentos para NÃO-INTENSIVISTAS

Cuidados e coleta de sangue da linha arterial

QUANDO EXECUTAR

1. Cheque o local de inserção, cateter e curativo, relate infecção/extravazamento para o enfermeiro da UTI, garanta que o acesso esteja seguro, troque o curativo se sujo/solto em cada turno
2. Linha arterial deve estar SEMPRE claramente identificada (etiqueta, oclisor vermelho) para prevenir administração acidental de medicações
3. Cheque o nivelamento do transdutor, do zero hidrostático, além do nível e pressão da bolsa pressórica: checagem de segurança a cada turno e durante reposicionamento/alterações súbitas na PA

COMO EXECUTAR

1. REGRAS de cuidado com a linha arterial

- NUNCA injete nada na linha arterial
- Garanta que as conexões estejam firmes - risco de embolia aérea/sangramento, observe o acesso durante reposicionamento
- Cheque se a pressão da bolsa pressórica está em 300mmHg
- Cheque a perfusão distal a cada 2 - 4 horas

2. Formato das ondas



- Curva dançada - gera uma medida imprecisa da PA
- Mudança no formato da onda/PA, reposicione mão/acesso, cheque o nível do transdutor com o eixo flebostático, zere a PAM
- Notifique o enfermeiro da UTI se não resolver

3. Nivelando e Zerando

- Silencie o alarme
- Gire a torneira de 3 vias deixando FECHADO para o paciente e ABERTO para o AR
- Retire a tampa, pressione zero, o monitor indicará quando tiver terminado
- Retorne a torneira de 3 vias deixando ABERTO para o transdutor & ABERTO para o paciente
- Recoloque a tampa

4. Amostra de sangue

- Sob supervisão do enfermeiro da UTI até que se considere seguro para fazer de forma independente

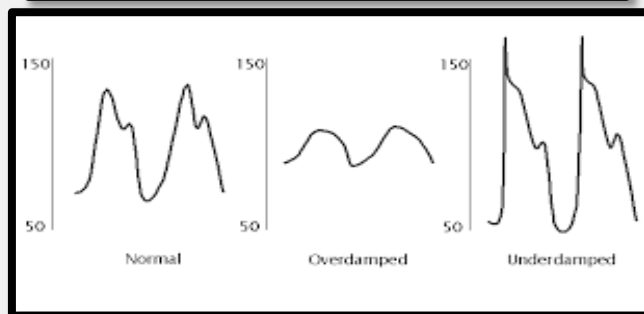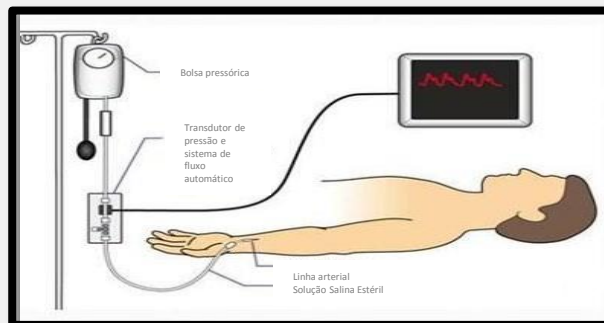

Eixo Flebostático



PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA/QUANDO CHAMAR AJUDA

1. Linha arterial desposicionada/sangramento: CHAME AJUDA COM URGÊNCIA e pressione o local
2. Formato da onda ruim/ linha plana não resolvida
3. Perfusão ruim/ ausência de pulso no braço ou perna onde a linha arterial foi inserida
4. Sempre mantenha os alarmes ligados e, quando possível, o sítio de inserção visível